



Catálogo de Pontas Piezoelétricas

Guia completo de insertos por equipamento, especialidade e indicação clínica — OPTYMUS, Clinical Plus e DentSurg Pro.



CVDENTUS · INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM
DIAMANTE

USO INTERNO / COMERCIAL — CONSULTE SEMPRE A BULA DO EQUIPAMENTO



OPTYMUS

Compacto, versátil e com a potência do diamante CVD para Endodontia e Periodontia no dia a dia clínico.

● Endo 22 pontas

**C22-E**

- Preparo da câmara pulpar (Potência 5)
- Preparo em ângulos (Potência 7)

**C2T**

- Remoção de núcleo (pino) (Potência 10)

**CR2T-E**

- Corte e compactação da guta percha

**CR4F-ST**

- Alisamento das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho (Potência 5)

**R1-E**

- Preparo da câmara pulpar (Potência 5)
- Remoção de cálculo na câmara pulpar (Potência 5)
- Compactar e aplainar a guta percha (Potência 5)

**TOT-E**

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (TOT-E) / Finalização da remoção do pino de fibra de vidro (Potência 2)
- Localização de canal (Potência 2)
- Remoção do trígono da dentina (Potência 2)
- Remoção de instrumento fraturado (Potência 2)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Potência 2)

**TOT-E1**

- Irrigação passiva (P.U.I.) (Potência 2)
- Ativação do cimento (Potência 2)
- Corte e termoplastificação da guta percha (Potência 2)
- Limpeza das áreas de ístimo (Potência 2)
- Remoção de lima fraturada (Potência 2)

**TOT-E2**

- Irrigação passiva (P.U.I.) (Potência 2)
- Ativação do cimento (Potência 2)
- Corte e termoplastificação da guta percha (Potência 2)
- Limpeza das áreas de ístimo (Potência 2)
- Remoção de lima fraturada (Potência 2)



T0T-E3

- Limpeza de canais achatados (Potência 3)
- Limpeza de canais em retratamento (Potência 3)



T0T-E5

- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) (Potência 2)
- Agitamento do cimento, ácidos e líquidos de limpeza (Potência 2)



T0U-2

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores (Potência 3)



T0U-L

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Potência 3)



T0U-R

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Potência 3)



T1F-2

- Cirurgia retropreparo em anteriores (Potência 3)



T1F-E

- Localização e desobstrução de canal (Potência 2)
- Remoção de cálculo/ ístimo (Potência 2)



T1F-L

- Cirurgia de retropreparo em posteriores (Potência 3)



T1F-R

- Cirurgia retropreparo em posteriores (Potência 3)



T1T-E

- Localização de canal (Potência 2)
- Remoção do trígono da dentina (Potência 2)
- Remoção de instrumento fraturado (Potência 2)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Potência 2)



TR1F-ST

- Desgaste na região de ístimo (Potência 5)
- Refinamento da entrada do canal (Potência 5)



VR04XR

- Abertura da janela óssea (Potência 8)
- Apicectomia/ seccionamento de raiz (Potência 8)



W1

- Abertura da Janela óssea (Potência 10)
- Apicectomia (Potência 10)



W1-O

- Abertura da Janela óssea (Potência 10)
- Apicectomia (Potência 10)

● **Perio** 6 pontas



T0T

- Raspagem supra e subgingival convencional delicada (sem diamante) (Potência 5)



T0TC

- Raspagem supragengival



T0U-2

- Raspagem delicada na região de furca (com diamante) (Potência 3)



T1T

- Raspagem supragengival convencional (Potência 3)



T1U-2

- Raspagem na região de furca (Potência 3)



W1T-O

- Raspagem supragengival convencional (Potência 5)



LINHA DE INSERTOS



Clinical **PLUS**

Duas canetas, quatro especialidades: Endo, Perio, Dentística e Prótese com o corte de diamante CVD.

101

PONTAS CATALOGADAS

9

ESPECIALIDADES

● Endo 24 pontas

**C22-E**

- Preparo da câmara pulpar. Realiza o desgaste e permite a remoção do teto e da dentina (Intensidade 50%)

**CR2T-E**

- Corte e compactação da guta percha (Intensidade 30%)

**CR4F-ST**

- Desgaste fino das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho (Intensidade 50%)

**R1-E**

- Desgaste para o preparo da câmara pulpar, permitindo a remoção do teto e da dentina (Intensidade 50%)
- Remoção de nódulo pulpar (Intensidade 50%)
- Localização do canal (Intensidade 50%)

**R2**

- Desgaste para o acesso à câmara pulpar (Intensidade 50%)

**R4**

- Desgaste para o acesso à câmara pulpar (Intensidade 80%)

**TOT-E**

- Localização de canal (Intensidade 20%)
- Remoção do trígono da dentina (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 20%)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Intensidade 20%)

**TOT-E1**

- Irrigação passiva ultrassônica (P.U.I.) (Intensidade 20%)
- Corte e termoplastificação de guta percha (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 30%)
- Ativação do cimento (Intensidade 30%)



T0T-E2

- Irrigação passiva ultrassônica (P.U.I.) (Intensidade 20%)
- Corte e termoplastificação de guta percha (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 30%)
- Ativação do cimento (Intensidade 30%)



T0T-E3

- Limpeza de canais achatados e canais em retratamento (Intensidade 30%)
- Limpeza de canais em retratamento (Intensidade 30%)



T0T-E5

- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) (Intensidade 20%)
- Agitamento do cimento, ácidos e líquidos de limpeza (Intensidade 20%)




T0U-2

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores (Intensidade 30%)



T0U-L

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 30%)

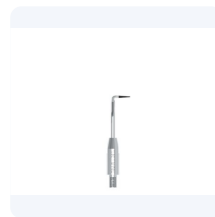

T0U-R

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 30%)



T1F-2

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores (Intensidade 30%)



T1F-E

- Localização e desobstrução de canal (Intensidade 20%)
- Limpeza da área de ístmo (Intensidade 20%)
- Remoção de nódulo pulpar (Intensidade 40%)



T1F-L

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 50%)



T1F-R

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 50%)



TIT-E

- Localização de canal (Intensidade 20%)
- Remoção do trígono da dentina (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 20%)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Intensidade 20%)



TRI-E

- Remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 70%)



TRIF-ST

- Limpeza lateral na região do istmo (Intensidade 50%)
- Desgaste fino na entrada do canal (Intensidade 50%)



VI-E

- Aplainamento na câmara pulpar (Intensidade 50%)



VR04XR

- Abertura da janela óssea (Intensidade 70%)



W1-O

- Apicectomia (Intensidade 80%)

● Perio 28 pontas



C4T

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-L

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-M

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-R

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CR1

- Peeling Gengival (área estreita) (Intensidade 50%)



CR4

- Peeling Gengival (áreas amplas) (Intensidade 80%)



FR4U

- Raspagem com diamante supragengival em face lingual dos dentes anteriores (Intensidade 30%)



FS-O

- Aumento de coroa com abertura de retalho (Realiza a raspagem do osso espesso em área mais estreita) (Intensidade 100%)



FS2-O

- Aumento de coroa com abertura de retalho (Realiza a raspagem mais ampla do osso espesso) (Intensidade 100%)



L3S-O

- Descolamento da gengiva (Intensidade 80%)



TOT

- Raspagem supra e subgengival convencional delicada (sem diamante) (Intensidade 30%)



TOTC

- Raspagem supragengival



T0U

- Raspagem interproximal supra e sub gengival delicada (com diamante) (Intensidade 30%)



T0U-2

- Raspagem delicada na região de furca (com diamante) (Intensidade 30%)



T0UX

- Raspagem interproximal supra e sub gengival delicada (com diamante) (Intensidade 30%)



T1F-E

- Alisamento radicular (Intensidade 40%)



T1T

- Raspagem supragengival convencional (sem diamante) (Intensidade 50%)



T1T-P

- Raspagem supra e subgengival convencional (sem diamante) para limpeza de implantes e peças cerâmicas (Intensidade 20%)



T1U

- Raspagem supragengival (com diamante) (Intensidade 30%)



T1U-2

- Raspagem na região de furca (com diamante) (Intensidade 30%)



T1U-E

- Raspagem subgengival (com diamante) (Intensidade 30%)



TR1-PK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



TR12-PK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 2mm de diamante e marcação de profundidade em 3 e 4 mm (Intensidade 70%)



TR1U-SD

- Raspagem supra e subgengival com diamante apenas nas laterais (Intensidade 30%)



VR1-LPK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



VR1-RPK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



VR1T

- Periotomia em todos os elementos (Intensidade 70%)



W1T-O

- Raspagem supragengival convencional (sem diamante) (Intensidade 50%)

● Dentística 22 pontas



C1

- Preparo em ângulos (Intensidade 50%)
- Abertura cavitária em ângulos (Intensidade 50%)



C22-E

- Preparo em ângulos (Intensidade 70%)



CH1-D

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais pequenas (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH1-M

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais pequenas (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH4-D

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais grandes (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CH4-M

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais grandes (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CR1XR

- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket (Intensidade 70%)



CR4

- Desgaste do término da remoção do material restaurador (Intensidade 80%)



CR4XR

- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket (Intensidade 100%)



R0,5

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 30%)



R1

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 50%)
- Contorno papilar (Intensidade 50%)



R1-A

- Desgaste/ abertura cavitária pequena de difícil como em túnel (Intensidade 50%)



R1-B

- Desgaste/ abertura cavitária pequena de difícil como face lingual de anteriores e acesso tipo túnel (Intensidade 50%)



R1-E

- Contorno papilar (Intensidade 50%)



R2

- Desgaste/ abertura cavitária média (Intensidade 50%)



R4

- Desgaste/ abertura cavitária grande (Intensidade 80%)



T1

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 70%)
- Remoção de material restaurador (área pequena) (Intensidade 70%)
- Preparo em sulcos com lesões mais incipientes (Intensidade 70%)



T1F-2

- Desgaste fino para remoção de excesso de material restaurador em região intrapapilar, supra e subgingival em face lingual (Intensidade 30%)



T1F-L

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular (Intensidade 50%)



T1F-R

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular (Intensidade 50%)



W1

- Remoção de material restaurador (amálgama grande) (Intensidade 80%)



W1-O

- Remoção de material restaurador (amálgama grande) (Intensidade 80%)

● Prótese 16 pontas



CH1-D

- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH1-M

- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH4-D

- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CH4-M

- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CM4

- Cimentação de lentes e próteses (Intensidade 40%)



CR1

- Desgaste para o término de preparo (margem estreita) (Intensidade 50%)



CR1U

- Refinamento do preparo em margem protética estreita e auxílio para a hibridização do selamento imediato (Intensidade 30%)
- Refinamento do desgaste em remoção do excesso de material (Intensidade 30%)



CR1XR

- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato (Intensidade 70%)



CR4

- Desgaste para o término do preparo para laminados e lente de contato (margem larga) (Intensidade 80%)



CR4U

- Refinamento do desgaste para remoção de excesso de material (Intensidade 50%)
- Refinamento do preparo em margem protética larga e auxílio para a hibridização do selamento imediato (Intensidade 50%)



CR4XR

- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato (Intensidade 100%)



T1U

- Refinamento desgaste para remoção de excesso de material restaurador e do preparo para laminados e lente de contato (Intensidade 30%)



TR1F-RV

- Desgaste fino na cervical de restauros em resina composta (Intensidade 50%)



VR04XR

- Odontosecção (Intensidade 70%)



W1

- Odontosecção (Intensidade 80%)
- Remoção de facetas (Intensidade 80%)



W1-O

- Odontosecção (Intensidade 80%)

● Endo/ Dentística 1 ponta



VR04XR

- Apicectomia/ seccionamento de raiz (Intensidade 70%)

● Endo/ Prótese 3 pontas



C2T

- Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados (Intensidade 100%)



TOT-E

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (TOT-E)
Finalização da remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 20%)



TIT-E

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (TOT-E)
Finalização da remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 20%)

● Dentística/ Prótese 4 pontas



F4

- Desgaste para a remoção do excesso de material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal (Intensidade 80%)



FR4U

- Refinamento do desgaste do material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal (Intensidade 30%)



T0U

- Refinamento delicado em áreas interproximais (Intensidade 30%)



T1F

- Desgaste fino para remoção de material restaurador na região intrapapilar, supra e subgingival (Intensidade 70%)
- Texturização em material restaurador (Intensidade 70%)

● **Prótese/ Dentística** 1 ponta



C1


- Biselamento (Intensidade 50%)

● **Prótese/ Ortodontia** 2 pontas



FR02XR

- Desgaste interproximal (Intensidade 40%)

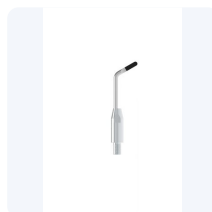

FR04XR

- Desgaste interproximal (Intensidade 70%)



LINHA DE INSERTOS



DentSurg **PRO**

INSERTOS CLÍNICOS

O piezo que atende todas as especialidades clínicas: Dentística, Endodontia, Periodontia e Prótese em um único equipamento.

101

PONTAS CATALOGADAS

9

ESPECIALIDADES

● Endo 24 pontas

**C22-E**

- Preparo da câmara pulpar. Realiza o desgaste e permite a remoção do teto e da dentina (Intensidade 50%)

**CR2T-E**

- Corte e compactação da guta percha (Intensidade 30%)

**CR4F-ST**

- Desgaste fino das paredes da câmara pulpar sem desgaste do assoalho (Intensidade 50%)

**R1-E**

- Desgaste para o preparo da câmara pulpar, permitindo a remoção do teto e da dentina (Intensidade 50%)
- Remoção de nódulo pulpar (Intensidade 50%)
- Localização do canal (Intensidade 50%)

**R2**

- Desgaste para o acesso à câmara pulpar (Intensidade 50%)

**R4**

- Desgaste para o acesso à câmara pulpar (Intensidade 80%)

**TOT-E**

- Localização de canal (Intensidade 20%)
- Remoção do trígono da dentina (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 20%)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Intensidade 20%)

**TOT-E1**

- Irrigação passiva ultrassônica (P.U.I.) (Intensidade 20%)
- Corte e termoplastificação de guta percha (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 30%)
- Ativação do cimento (Intensidade 30%)



T0T-E2

- Irrigação passiva ultrassônica (P.U.I.) (Intensidade 20%)
- Corte e termoplastificação de guta percha (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 30%)
- Ativação do cimento (Intensidade 30%)



T0T-E3

- Limpeza de canais achatados e canais em retratamento (Intensidade 30%)
- Limpeza de canais em retratamento (Intensidade 30%)



T0T-E5

- Irrigação passiva (P.U.I. e C.U.I.) (Intensidade 20%)
- Agitamento do cimento, ácidos e líquidos de limpeza (Intensidade 20%)




T0U-2

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores (Intensidade 30%)



T0U-L

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 30%)

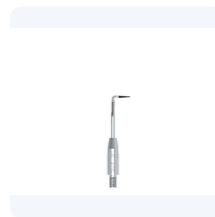

T0U-R

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 30%)



T1F-2

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em anteriores (Intensidade 30%)



T1F-E

- Localização e desobstrução de canal (Intensidade 20%)
- Limpeza da área de ístmo (Intensidade 20%)
- Remoção de nódulo pulpar (Intensidade 40%)



T1F-L

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 50%)



T1F-R

- Cirurgia parendodôntica - Retropreparo em posteriores (Intensidade 50%)



TIT-E

- Localização de canal (Intensidade 20%)
- Remoção do trígono da dentina (Intensidade 20%)
- Remoção de instrumento fraturado (Intensidade 20%)
- Limpeza de canais em retratamento através da remoção da guta-percha do 1/2 cervical no início do retratamento endodôntico (Intensidade 20%)



TRI-E

- Remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 70%)



TRIF-ST

- Limpeza lateral na região do istmo (Intensidade 50%)
- Desgaste fino na entrada do canal (Intensidade 50%)



VI-E

- Aplainamento na câmara pulpar (Intensidade 50%)



VR04XR

- Abertura da janela óssea (Intensidade 70%)



W1-O

- Apicectomia (Intensidade 80%)

● Perio 28 pontas



C4T

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-L

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-M

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CH4T-R

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho. Indicado para desgaste do osso mais espesso. Possui diamante apenas no topo e realiza o desgaste ósseo através de uma abertura na gengiva (mini flap) para a introdução da ponta. (Intensidade 80%)



CR1

- Peeling Gengival (área estreita) (Intensidade 50%)



CR4

- Peeling Gengival (áreas amplas) (Intensidade 80%)



FR4U

- Raspagem com diamante supragengival em face lingual dos dentes anteriores (Intensidade 30%)



FS-O

- Aumento de coroa com abertura de retalho (Realiza a raspagem do osso espesso em área mais estreita) (Intensidade 100%)



FS2-O

- Aumento de coroa com abertura de retalho (Realiza a raspagem mais ampla do osso espesso) (Intensidade 100%)



L3S-O

- Descolamento da gengiva (Intensidade 80%)



T0T

- Raspagem interproximal supra e subgengival convencional delicada (sem diamante) (Intensidade 30%)



T0TC

- Raspagem supragengival



T0U

- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada (com diamante) (Intensidade 30%)



T0U-2

- Raspagem delicada na região de furca (com diamante) (Intensidade 30%)



T0UX

- Raspagem interproximal supra e subgengival delicada (com diamante) (Intensidade 30%)



T1F-E

- Alisamento radicular (Intensidade 40%)



T1T

- Raspagem supragengival convencional (sem diamante) (Intensidade 50%)



T1T-P

- Raspagem supra e subgengival convencional (sem diamante) para limpeza de implantes e peças cerâmicas (Intensidade 20%)



T1U

- Raspagem supragengival (com diamante) (Intensidade 30%)



T1U-2

- Raspagem na região de furca (com diamante) (Intensidade 30%)



T1U-E

- Raspagem subgengival (com diamante) (Intensidade 30%)



TR1-PK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



TR12-PK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 2mm de diamante e marcação de profundidade em 3 e 4 mm (Intensidade 70%)



TR1U-SD

- Raspagem supra e subgengival com diamante apenas nas laterais (Intensidade 30%)



VR1-LPK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



VR1-RPK

- Aumento de coroa clínica sem abertura de retalho (Flapless). Realiza o desgaste ósseo sem lesionar a gengiva. Possui 3mm de diamante e marcação de profundidade em 4 e 5 mm (Intensidade 70%)



VR1T

- Periotomia em todos os elementos (Intensidade 70%)



W1T-O

- Raspagem supragengival convencional (sem diamante) (Intensidade 50%)

● Dentística 22 pontas



C1

- Preparo em ângulos (Intensidade 50%)
- Abertura cavitária em ângulos (Intensidade 50%)



C22-E

- Preparo em ângulos (Intensidade 70%)



CH1-D

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais pequenas (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH1-M

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais pequenas (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH4-D

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais grandes (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CH4-M

- Desgaste para aberturas de cavidades interproximais grandes (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CR1XR

- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket (Intensidade 70%)



CR4

- Desgaste do término da remoção do material restaurador (Intensidade 80%)



CR4XR

- Alto desgaste para abertura cavitária e remoção de resina e pós bracket (Intensidade 100%)



R0,5

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 30%)



R1

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 50%)
- Contorno papilar (Intensidade 50%)



R1-A

- Desgaste/ abertura cavitária pequena de difícil como em túnel (Intensidade 50%)



R1-B

- Desgaste/ abertura cavitária pequena de difícil como face lingual de anteriores e acesso tipo túnel (Intensidade 50%)



R1-E

- Contorno papilar (Intensidade 50%)



R2

- Desgaste/ abertura cavitária média (Intensidade 50%)



R4

- Desgaste/ abertura cavitária grande (Intensidade 80%)



T1

- Desgaste/ abertura cavitária pequena (Intensidade 70%)
- Remoção de material restaurador (área pequena) (Intensidade 70%)
- Preparo em sulcos com lesões mais incipientes (Intensidade 70%)



T1F-2

- Desgaste fino para remoção de excesso de material restaurador em região intrapapilar, supra e subgingival em face lingual (Intensidade 30%)



T1F-L

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular (Intensidade 50%)



T1F-R

- Desgaste fino na região intrapapilar, supra e subgingival em face vestibular (Intensidade 50%)



W1

- Remoção de material restaurador (amálgama grande) (Intensidade 80%)



W1-O

- Remoção de material restaurador (amálgama grande) (Intensidade 80%)

● Prótese 16 pontas



CH1-D

- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH1-M

- Desgaste para o término de preparo em margem estreita ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 50%)



CH4-D

- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CH4-M

- Desgaste para o término de preparo em margem larga ou em região interproximal (medial ou distal) (Intensidade 80%)



CM4

- Cimentação de lentes e próteses (Intensidade 40%)



CR1

- Desgaste para o término de preparo (margem estreita) (Intensidade 50%)



CR1U

- Refinamento do preparo em margem protética estreita e auxílio para a hibridização do selamento imediato (Intensidade 30%)
- Refinamento do desgaste em remoção do excesso de material (Intensidade 30%)



CR1XR

- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato (Intensidade 70%)



CR4

- Desgaste para o término do preparo para laminados e lente de contato (margem larga) (Intensidade 80%)



CR4U

- Refinamento do desgaste para remoção de excesso de material (Intensidade 50%)
- Refinamento do preparo em margem protética larga e auxílio para a hibridização do selamento imediato (Intensidade 50%)



CR4XR

- Alto desgaste para o preparo de laminados e lente de contato (Intensidade 100%)



T1U

- Refinamento desgaste para remoção de excesso de material restaurador e do preparo para laminados e lente de contato (Intensidade 30%)



TR1F-RV

- Desgaste fino na cervical de restauros em resina composta (Intensidade 50%)



VR04XR

- Odontosecção (Intensidade 70%)



W1

- Odontosecção (Intensidade 80%)
- Remoção de facetas (Intensidade 80%)



W1-O

- Odontosecção (Intensidade 80%)

● Endo/ Dentística 1 ponta



VR04XR

- Apicectomia/ seccionamento de raiz (Intensidade 70%)

● Endo/ Prótese 3 pontas



C2T

- Remoção de pinos metálicos fundidos ou rosqueados (Intensidade 100%)



TOT-E

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (TOT-E)
Finalização da remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 20%)



TIT-E

- Remoção na linha do cimento ao redor de pino metálico e - dentro do canal - (TOT-E)
Finalização da remoção do pino de fibra de vidro (Intensidade 20%)

● Dentística/ Prótese 4 pontas



F4

- Desgaste para a remoção do excesso de material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal (Intensidade 80%)



FR4U

- Refinamento do desgaste do material restaurador em face lingual de dentes anteriores ou oclusal (Intensidade 30%)



T0U

- Refinamento delicado em áreas interproximais (Intensidade 30%)



T1F

- Desgaste fino para remoção de material restaurador na região intrapapilar, supra e subgingival (Intensidade 70%)
- Texturização em material restaurador (Intensidade 70%)

● **Prótese/ Dentística** 1 ponta



C1


- Biselamento (Intensidade 50%)

● **Prótese/ Ortodontia** 2 pontas



FR02XR

- Desgaste interproximal (Intensidade 40%)

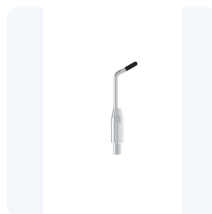

FR04XR

- Desgaste interproximal (Intensidade 70%)



DentSurg **PRO**

INSERTOS CIRÚRGICOS

Da clínica à cirurgia óssea — os mesmos insertos cirúrgicos de precisão para implantodontia e cirurgia.

● Cirúrgico 52 pontas

**SCP 3.0**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno (Cortical / Medular)
- Trefina (Cortical / Medular)

**SCP 3.5**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno (Cortical / Medular)
- Trefina (Cortical / Medular)

**SCP 3.8**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno (Cortical / Medular)
- Trefina (Cortical / Medular)

**SCP 4.1**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno (Cortical / Medular)
- Trefina (Cortical / Medular)

**SCP 4.8**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno (Cortical / Medular)
- Trefina (Cortical / Medular)

**SCPF 3.0**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno delicada (Cortical / Medular)
- Trefina com ação mais delicada (Cortical / Medular)

**SCPF 3.5**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno delicada (Cortical / Medular)
- Trefina com ação mais delicada (Cortical / Medular)

**SCPF 3.8**

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno delicada (Cortical / Medular)
- Trefina com ação mais delicada (Cortical / Medular)



SCPF 4.1

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno delicada (Cortical / Medular)
- Trefina com ação mais delicada (Cortical / Medular)



SCPF 4.8

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)
- Perfuração para implante (Cortical / Medular)
- Coleta de osso autógeno delicada (Cortical / Medular)
- Trefina com ação mais delicada (Cortical / Medular)



SCR7

- Limpeza de alvéolos



SE1

- Descolamento da membrana sinusal (Membrana)



SE9F

- Raspagem para acabamento e regularização da superfície óssea (Cortical)



SE9G

- Raspagem para desgaste da superfície óssea (Cortical)



SF11

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical)



SF2

- Perfuração óssea (stop de profundidade 3,5mm)



SF3

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical / Medular)



SF3-L

- Osteotomia e Ostectomia lateral (área de difícil acesso) (Cortical / Medular)



SF3-R

- Osteotomia e Ostectomia lateral (área de difícil acesso) (Cortical / Medular)



SF32

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical)



SF32-O

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical)



SF38

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical / Medular)



SF38-O

- Osteotomia e Ostectomia na ortogonal (área de difícil acesso) (Cortical / Medular)



SF3F

- Osteotomia e Ostectomia delicada (próxima à tecidos moles) (Cortical / Medular)



SF3F-O

- Osteotomia e Ostectomia delicada na ortogonal (área de difícil acesso próxima à tecidos moles) (Cortical / Medular)



SFR3

- Cortes ósseos (osteotomia e ostectomia)



SFR4

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical)



SFR42

- Osteotomia e Ostectomia (Cortical)



SFR43

- Cortes ósseos



SFR5

- Cortes ósseos (osteotomia e ostectomia)



SFS3-O

- Osteoplastia (Cortical)
- Coleta de osso autógeno (Cortical)



SFTV-O

- Periotomia em todos os elementos (Cortical)
- Osteotomia e Ostectomia delicada (Cortical)



SFTV2-O

- Ostectomia (Cortical / Medular)
- Osteotomia em torno de ápices ou implantes fraturados (Cortical / Medular)



SI 3.0

- Guia para SCP (Cortical)



SI 3.5

- Guia para SCP (Cortical)



SI 3.8

- Guia para SCP (Cortical)



SI 4.1

- Guia para SCP (Cortical)



SI 4.8

- Guia para SCP (Cortical)



SL1

- Osteotomia delicada (próxima à tecidos moles) (Cortical / Medular)



SL2

- Osteotomia e Ostectomia



SL3G

- Raspagem e regularização óssea



SLO-2

- Descolamento da membrana (Membrana)



SLTV-O

- Descolamento de retalho (Cortical / Medular)
- Periotomia de molares (Cortical / Medular)
- Descolamento da membrana sinusal (Membrana)



SR11

- Desgaste ósseo e descolamento de membrana



SR2

- Perfuração inicial para colocação de implante (Cortical / Medular)



SR4

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)



SR9

- Perfuração óssea e sinus lift (Cortical)



ST10G

- Limpeza de cavitações ósseas



ST23

- Perfuração óssea (cirurgias zigomáticas)



ST33

- Perfuração óssea (cirurgias zigomáticas), Ø2,45/2,6mm



STR1

- Perfuração óssea (Cortical)



STR4

- Perfuração óssea (Cortical / Medular)



Inovação, Tecnologia e Soluções em Diamante

OPTYMUS · Clinical Plus · DentSurg Pro

cvdentus.com.br